


Kokio ilgio adatas insulino terapijai rekomenduoja ekspertai?



Naujose insulino injekcijų cukriniu diabetu sergantiems pacientams gairėse **trumpas adatas*** rekomenduojama naudoti **visiems pacientams**, įskaitant stambesnius žmones**. Nėra medicininių priežasčių, kodėl reikėtų rekomenduoti naudoti ilgesnes adatas. Taisyklė, kad pasirinktas adatos ilgis priklauso nuo paciento kūno dydžio, nebėra naudojama, kadangi **klinikiniai tyrimai*** parodė, kad vidutinis visų pacientų dermos sluoksnio storis yra 2,5 mm**. Injekciją atliekant statmenai be odos suėmimo, **trumpa adata reikiama suleidimo vieta pasiekama visiems pacientams**, kadangi praduriamas dermos sluoksnis ir pasiekiamas poodinis audinys.

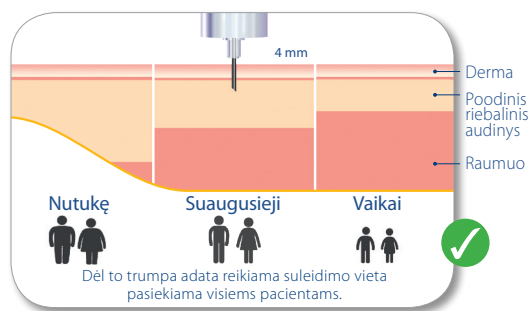

Insupen 32G Pagaliau yra adata, tinkanti visiems injekcijų įpročiams.

Insupen 32G yra idealus sprendimas gydantis insulinu; tai yra pažangiausias Pic sprendimas tiems, kuriems reikia mažiausio skersmens **adatos pasirinkimo laisvės, nekeičiant įprasto injekcijos metodo** (leidžiantis statmenai/ kampu/ suėmus odos raukšlę).



Insupen 32G x 6 mm
 Adata švirkštimo priemonei
 Skersmuo 32G – 0,23 mm
 Ilgis 6 mm
 100 vnt. pakuotėje



**ATSIMINKITE, KAD ADATA YRA VIENKARTINĖ MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖ.
 PO INJEKCIJOS ADATOS NIEKADA NENAUDOKITE KARTOTINAI!**

www.picolution.com

Gamintojas:



Atstovas Lietuvoje:



UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA,
 A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius
 Tel. +370 5 275 5224

Insupen priklauso A tipui – EN ISO 11608-2:2012. Tinka su šių gamintojų švirkštimo priemonėmis: AMYLIN, BERLIN CHEMIE, BIOTON, BD, ELI LILLY, TONGHUA DONGBAO, OWEN MUMFORD, YPSOMED, MYLAN, NOVO NORDISK, SANOFI (konkrečių švirkštiklių pavadinimai nurodyti ant pakuotės). Sterili, jei nepažeista, adatos pakuotė. Po kiekvienos injekcijos nuimti nuo švirkštimo priemonės ir išmesti. Utilizuojant laikytis šalies reikalavimų. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje toliau nuo cheminių medžiagų. Vienkartinė priemonė (vienam pacientui). Draudžiama vartoti pakartotinai: gali sąlygoti infekciją ir neveikti. Plona adatos sienelė. Platus adatos vidinis spindis užtikrina geresnę srovę ir mažina laiko ir pastangų sąnaudas, reikalingas injekcijai. Atsiminkite, kad kiekviena injekcija atliekama su nauja adata. **Be latekso.**

* Trumpomis adatomis laikomos 4, 5 ir 6 mm adatos.

** New Insulin Delivery Recommendations. Anders H. Frid, MD; Gillian Kruegel, DSN; Giorgio Grassi, MD; Serge Halimi, MD; Debbie Hicks, DSN; Laurence J. Hirsch, MD; Mike J. Smith, DSN; Regine Wellhoener, MD; Bruce W. Bode, MD; Irl B. Hirsch, MD; Sanjay Kalra, MD; Linong Ji, MD; and Kenneth W. Strauss, MD. Mayo Clin Proc. n September 2016;91(9):1231-1255.

*** "Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injection: implication for needle length recommendation" Michael A. Gibney, Christina H. Arce, Karen J. Byron, Laurence J. Hirsch.

